

Laborpont.

EASYCAL SZÉKLET MINTAVEVŐ


CALPREST CALPROTECTIN MENNYISÉGI VIZSGÁLATHOZ

Az EasyCal a jelenleg forgalomban lévő legfejlettebb és legpontosabb eszköz a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges megfelelő mennyiségű széklet összegyűjtésére.

 **Az EasyCal mintavevő eszközt a felhasználásig (mintavételig) is hűtve kell tárolni!**

Az EasyCal használatra kész, egy **speciális, 2,8 ml oldatot tartalmazó csőből** és egy kifejezetten erre a célra kialakított hét, vízszintes barázdával ellátott **mérőpálcából** áll a minta gyűjtéséhez. A speciális kialakítás lehetővé teszi az egyszerű felhasználást, bármilyen típusú székletről (normál, folyékony, nem formált, száraz) is van szó.

A székletminta összegyűjtése után a pálcát a kék, tölcsészerű szeparátorba/elválasztóba kell helyezni, amely a felesleges – méréshez nem szükséges – mintamennyiséget magában tartja. Így már csak a megfelelő mennyiségű széklet (56 mg) kerül a csőben lévő oldatba.

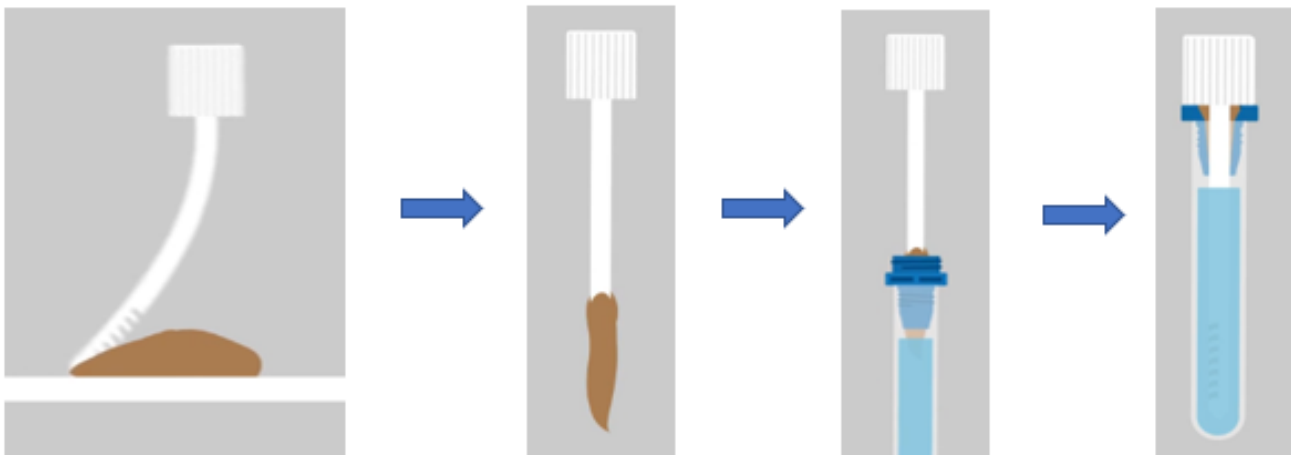

MINTAVÉTEL MÓDJA:

1. Széklet felfogásához használjon papír mintagyűjtő alátétet
FONTOS! A teszt eredményét befolyásolhatja, ha a vécécsészében lévő szagtalanító- / fertőtlenítő-szerrel érintkezik a székletminta.
2. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét. A kupakhoz csatlakoztatott pálcát dugja a székletbe kb. 2 centiméternyire (ameddig „recés, fogazott” a vége).
3. Húzza ki a pálcát a székletből és tegye vissza a mintagyűjtő csőbe (a csavaró mozdulatok következtében a mintafőlönség a speciálisan kialakított illeszték tetején marad). A recés végekben felfogott mintát rázogatóval mossa bele a csőben található folyadékba.
4. A minta csak a megfelelően kivitelezett mintavétel esetén dolgozható fel.

Amennyiben a mintavétel napján nem tudja eljuttatni a mintát a laboratóriumba, a minta legfeljebb **4 napig hűtve (2-8 °C) tárolható.**

Hölgyeknél kerülni kell a menstruáció alatti mintavételt.